

TEMPUR-MED®

テンピュール-MED®プロフェッショナル仕様製品カタログ




TEMPUR-MED®
PRESSURE REDISTRIBUTING PRODUCTS

About TEMPUR

テンピュール®の歴史



テンピュール®素材の原型は、1970年にNASA(米国航空宇宙局)のエームズ研究センターでロケット打ち上げ時の宇宙飛行士にかかる強烈な加速重力の緩和及び宇宙船内の座席を快適にするために開発されました。この技術は小規模生産のため、医療向けの特殊な場合にのみ利用されるという状況でしたが、1991年にデンマークのダン・フォーム工場で、テンピュール®素材を大規模に生産する準備が整い、枕、マットレス、クッションなど様々な製品に形を変えて、世界中の人々に愛されるブランドへと発展しました。

NASAの公式認定を受けた唯一のマットレス・ピローブランド



NASA承認。米国宇宙財団より「認定技術」ロゴの使用を許可された唯一のマットレス・ピローブランド。

1998年、テンピュール®は宇宙技術応用の成果が認められ、NASA(米国航空宇宙局)からその功績を讃えられました。また、テンピュール®製品のパッケージやパンフレット、広告などに「認定技術」ロゴを使用できるライセンスが与えられました。

「認定技術」ロゴは宇宙に関する取り組みから生まれたことが認められた製品やサービス、あるいは宇宙飛行で使用された製品やサービスのみが使用できるのです。マットレス・ピローブランドでは世界で唯一、テンピュール®だけがNASAから公式認定されています。

耐久性に優れているからこそできる長期保証

7
YEAR
LIMITED
WARRANTY
MATTRESS
7年限定保証

3
YEAR
WARRANTY
PILLOW
3年保証

テンピュール®素材は高密度なフォームですので耐久性に大変優れており、保証期間はピローで3年間、またマットレス(一部商品を除く)においては7年間の限定保証がついております。快適な寝姿勢を保つには、高密度なフォームのサポート力が必要です。低密度のフォームを使用している一般的な低反発マットレスには、テンピュール®のような耐久性は望めません。長期間、安心して使用いただけるのがテンピュール®素材の特徴であり、長期保証は耐久性への自信の証なのです。

体温に反応します

テンピュール®素材が体温と重さに反応し、身体にふれる場所は素材がベストな柔らかさとなりフィットします。圧迫感を取り除きもっとも快適な姿勢でお休みいただけます。



優れたサポート力

テンピュール®素材が身体にやさしく沿って、首、肩、脚に素晴らしいサポートと快適さを与えます。




より良い医療環境を実現する テンピュール®の素材特性

床擦れの予防と体圧分散

床擦れを発生させる要因は様々ですが、その第一に挙げられるのが体重による圧迫です。通常、手術台に付属したパッドやマットレスには、あまり体圧分散効果がありませんので、長時間に及ぶ手術などでは床擦れを発生させる可能性がかなり高まることとなります。その点、テンピュール®素材ならば、独自の体圧を分散させる特性により床擦れのリスクを軽減することができます。テンピュール®は温度感応度が高く粘弾性に富み、患者さんがテンピュール®の上に横たわると身体の形にぴったりと沿い、接触面積が広がり平均圧が低くなります。その結果、血管圧迫が抑えられ、血管循環の悪化や赤化がおこるリスクが減少するのです。何よりも、病に苦しむ患者さんに対し、良質な寝ごちを提供できることも大きなメリットといえるでしょう。



テンピュール®素材は体温と体圧に敏感に反応し、身体の線に沿ってフィットする状態でサポートします。

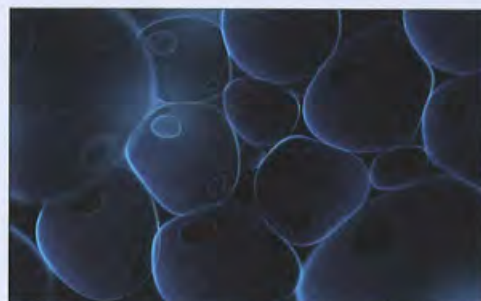

オープンセル（開放気泡）構造だから通気性も良好。耐久性抜群でメンテナンスの手間も省けます。



PUカバー

テンピュール-MED®製品には空気透過性の大きな防水PUカバーがついており、接合部分が溶着タイプのもの、縫製タイプのものでございます。

PUカバーのお手入れ時の注意点

- 液温は、95℃を限度として洗濯ができます。
- 塩素系漂白剤による漂白はできません。
- アイロン掛けはできません。
- ドライクリーニングはできません。
- 洗濯の際は、裏返してファスナーを開いてください。

※テンピュール®素材は洗えません。

テンピュール-MED® ホスピタルマットレス


手術後の痛みのある身体に安定したサポートと体圧軽減を提供します。

※オーダー可能サイズ：60×120cm～（最大210cmまで）

テンピュール-MED® トッパー (7cm)

テンピュール-MED®トッパーは、現在お使いのマットレスの上に重ねてご使用ください。

トッパー断面
一層構造

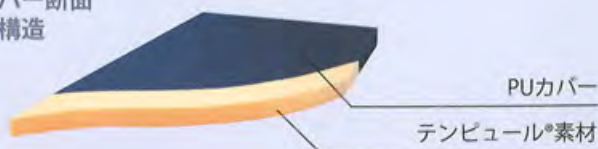

PUカバー
テンピュール®素材




7
YEAR
WARRANTY
MATTRESS
7年限定保証
溶着タイプ

サイズ：83×191×7cm 商品番号 118132
本体価格 98,000円 + 税
サイズ：91×191×7cm 商品番号 118136
本体価格 103,000円 + 税

テンピュール-MED® コンビマットレス (15cm)

テンピュール-MED®コンビマットレスは、現在お使いのマットレスと入れ替えてお使いいただくマットレスです。

マットレス断面
二層構造

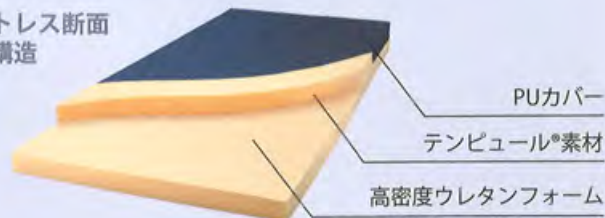

PUカバー
テンピュール®素材
高密度ウレタンフォーム



7
YEAR
WARRANTY
MATTRESS
7年限定保証
受注生産
(納期約3ヶ月)
溶着タイプ


サイズ：83×191×15cm 商品番号 102355
本体価格 148,000円 + 税
サイズ：91×191×15cm 商品番号 109993A
本体価格 160,000円 + 税

テンピュール-MED® ピロー

首をしっかり支え、適切な寝姿勢を保ちます。

テンピュール-MED® ネックピロー

頭部からネック部をしっかりサポートし、安定した形で体圧を分散させます。

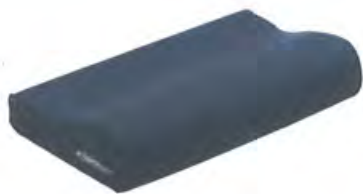

3
YEAR
WARRANTY
PILLOW
3年保証
縫製タイプ

XS：サイズ：31×50×7/4cm 商品番号 120701
本体価格 15,000円 + 税
S：サイズ：31×50×8/5cm 商品番号 120476
本体価格 16,000円 + 税
M：サイズ：31×50×10/7cm 商品番号 120477
本体価格 17,000円 + 税
L：サイズ：31×50×11.5/8.5cm 商品番号 120478
本体価格 18,000円 + 税

テンピュール-MED® クラシックピロー

中心部になだらかなくぼみを設けることによって、テンピュール®の基本コンセプトであるネックピローとしての機能性も確保しています。



3
YEAR
WARRANTY
PILLOW
3年保証
縫製タイプ

サイズ：55×38×10.5cm 商品番号 180427
本体価格 16,000円 + 税

テンピュール-MED® コンフォートピロー

ご自身でボリュームを整えることができるテンピュール®チップを内包したタイプのピローです。



3
YEAR
WARRANTY
PILLOW
3年保証
縫製タイプ

サイズ：63×43cm 商品番号 180682
本体価格 19,000円 + 税

テンピュール-MED® 手術台用マットレス

手術中の患者さんの体圧を分散し、安定した状態で維持できます。

※オーダー可能サイズ：60×120cm～（最大210cmまで）

● トッパー (7cm)

パッド入りの手術台の上に乗せて使うタイプのマットレス。



● コンビマットレス (10cm)

パッドの入っていない手術台の上に乗せて使う2層構造を持つマットレス。



テンピュール-MED® 検査台用トッパー (7cm/4cm)

検査台やスキャナーの上に重ねて使用するためのマットレス。

※オーダー可能サイズ：50×200cm～（最大320cmまで）

テンピュール-MED® 手術台用ポジショニング製品

手術中に頸部や上肢を安定させることができます。


テンピュール-MED® 手術台用アームボード

上肢を安定して支持できるように、
表面に自然なくぼみがついています。



テンピュール-MED® 手術台用ネックピロー

手術時の頭部と頸部の安定と体位の支
持が可能となります。

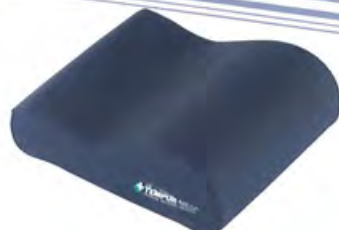

テンピュール-MED® 手術台用サポートネックピロー

チューブ挿管時にも安定した支持を得る
ことができます。



3
YEAR
WARRANTY
PILLOW
3年保証

溶着タイプ

サイズ：18×60.5×5/8cm 商品番号 118941
本体価格 53,000円 + 税

3
YEAR
WARRANTY
PILLOW
3年保証

溶着タイプ

サイズ：25×31×10/7cm 商品番号 123082
本体価格 29,000円 + 税

3
YEAR
WARRANTY
PILLOW
3年保証

縫製タイプ

サイズ：30×25×10/5.5cm 商品番号 122910
本体価格 17,000円 + 税

テンピュール-MED® 手術台用ポジショニングキット

様々な姿勢での体位安定と体圧分散を実現します。

テンピュール-MED®

伏臥位手術用ポジショニングキット(9点セット)




※写真は、パット入りの手術台上に9点セットとオプションを組み合わせた使用例です。

5つの基本パーツと4枚のクッションで構成された柔軟性に富んだ体圧分散システムです。すべてのパーツは、支えと心地よさが最も良い状態になるように、それぞれ別の位置に置くことができます。



フェイスサポート

サイズ：φ30×18/15

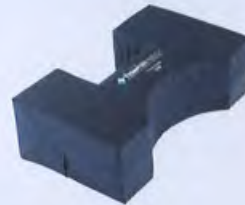

ボディサポート/
ヒップサポート (2個)

サイズ：50×30×15cm




ニーサポート

サイズ：50×30×3cm



ユニバーサルピロー

サイズ：50×20×10cm

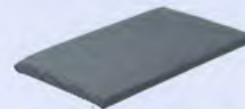

ゼネラルサポート (4枚セット)

サイズ：50×30×2.5cm

※ゼネラルサポートは高さ調整用マットレスでウレタンフォームになっておりますので、体圧分散効果はありません。

3
YEAR

WARRANTY

PILLOW

3年保証

溶着タイプ

9点セットで 商品番号 118900


本体価格 380,000円 + 税

テンピュール-MED® 側臥位手術用ポジショニングキット



マットレス上層部分の組み合わせパーツをはずして、患者さんの上腕部をくぼみに合わせることで、仰臥位から側臥位へ、または伏臥位から側臥位へと患者さんの体位変換に合わせて使用することが可能となります。また、テンピュール-MED®手術台用アームボードと合わせて使うことにより、側臥位時に上肢全体にかかる体圧分散が可能となります。

受注生産
(納期約3ヶ月)

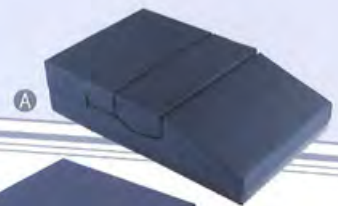

7
YEAR

LIMITED
WARRANTY

MATTRESS

7年限定保証

溶着タイプ

A：サイズ：50×80×18.5/10cm(3パーツ)

商品番号 109981

B：サイズ：50×60×10cm

商品番号 109963

セット

①+②×2個

本体価格 297,000円 + 税

単品

① 本体価格 185,000円 + 税

② 本体価格 56,000円 + 税

テンピュール-MED® ポジショニング製品

患者さんの体位の安定と除圧を行うための様々な状況に対応できるクッションです。

テンピュール-MED® ユニバーサルピロー

首、胸部、腕、ひざ、足などの体圧分散やポジショニングに適しています。



3
YEAR
WARRANTY
PILLOW
3年保証

縫製タイプ

- A: サイズ: 50×20×10cm 商品番号 125523
本体価格 17,000円 + 税
- B: サイズ: 35×20×10cm 商品番号 125023
本体価格 15,000円 + 税



テンピュール-MED® マルチピロー

除圧や固定の必要な部分に補助的にお使いいただけます。



3
YEAR
WARRANTY
PILLOW
3年保証

縫製タイプ

- A: サイズ: 68×30×8/1cm 商品番号 125724
本体価格 20,000円 + 税
- B: サイズ: 50×30×8/1cm 商品番号 125675
本体価格 18,000円 + 税
- C: サイズ: 34×30×8/1cm 商品番号 125651
本体価格 14,000円 + 税



テンピュール-MED® 側面サポート

側臥位手術中の背部や腹部に使用し、体位を固定します。



3
YEAR
WARRANTY
PILLOW
3年保証

縫製タイプ

- A: サイズ: 45×15×10cm 商品番号 124711
本体価格 35,000円 + 税
- B: サイズ: 35×15×10cm 商品番号 124700
本体価格 29,000円 + 税



テンピュール-MED® ポジショニングロール


術中、術後の固定やベッドでの治療のために、ひざの下や足の下に使えます。



3
YEAR
WARRANTY
PILLOW
3年保証

縫製タイプ

- A: サイズ: 直径15cm×40cm 商品番号 125110
本体価格 26,000円 + 税
- B: サイズ: 直径10cm×40cm 商品番号 125100
本体価格 25,000円 + 税

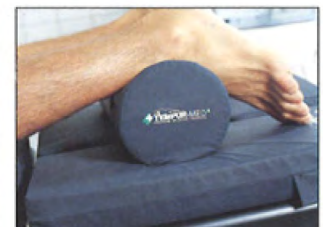

テンピュール-MED® ベッドバックサポート

腰や背中、ひざの下での使用に適しています。



3
YEAR

WARRANTY
PILLOW

3年保証

縫製タイプ

レギュラー：サイズ：70×40×6/2cm

商品番号 124630

本体価格 15,000円 + 税

スモール：サイズ：50×37.5×5/1cm

商品番号 124651

本体価格 13,000円 + 税



テンピュール-MED® ベインピロー

下肢の除圧に使用し、特に踵の負担を軽減します。



3
YEAR

WARRANTY
PILLOW

3年保証

縫製タイプ

サイズ：50×75×15/0cm

商品番号 180338

本体価格 30,000円 + 税



テンピュール-MED® レッグスパーサー(シングル)

腕や足の下などの体圧を分散させたいところに使えます。



3
YEAR

WARRANTY
PILLOW

3年保証

縫製タイプ

サイズ：27×20×10cm

商品番号 180530

本体価格 20,000円 + 税

テンピュール-MED®

レッグスパーサー(ダブル)

折り畳んで足の上に挟んだり、広げて踵にかかる体圧を分散するために足首の下にお使いいただけます。



折り畳み時

3
YEAR

WARRANTY
PILLOW

3年保証

縫製タイプ

サイズ：27/54×20×20/10cm

商品番号 180525

本体価格 22,000円 + 税

テンピュール-MED®

レッグスパーサー(ロング)

足首からふくらはぎにかけての体圧を分散します。



3
YEAR

WARRANTY
PILLOW

3年保証

縫製タイプ

サイズ：27×38×10cm

商品番号 180536

本体価格 25,000円 + 税

テンピュール-MED® 車椅子用クッション

座った時に身体の形にぴったりとフィットするので、安定していながらもくつろいだ姿勢で座ることができます。また、出っ張った尾骨や大腿骨等、身体の突出した部分にかかる体圧も和らげます。



テンピュール-MED® 車椅子用クッション



3
YEAR
WARRANTY
PILLOW
3年保証

溶着タイプ

サイズ：40×40×7.5cm 商品番号 127614

本体価格 30,000円 + 税

サイズ：40×40×5cm 商品番号 127553

本体価格 27,000円 + 税

テンピュール-MED® 車椅子用クッション・V字タイプ



3
YEAR
WARRANTY
PILLOW
3年保証

溶着タイプ

サイズ：40×40×9/5cm 商品番号 127528

本体価格 36,000円 + 税

テンピュール-MED® ケアクッション




3
YEAR
WARRANTY
PILLOW
3年保証

縫製タイプ

サイズ：40×40×5cm 商品番号 127555

本体価格 15,000円 + 税

テンピュール-MED® ケアクッションスーパーソフトタイプ

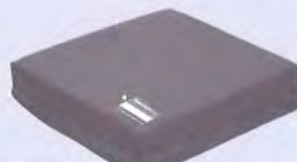

3
YEAR
WARRANTY
PILLOW
3年保証

縫製タイプ

サイズ：40×40×7.5cm 商品番号 127605

本体価格 18,000円 + 税

※上層部は5cmのスーパーソフトタイプのテンピュール®素材、
下層部は2.5cmのテンピュール®素材です。
※軽体重の方にお使いいただけます。

テンピュール-MED® ケアクッション・V字タイプ



3
YEAR
WARRANTY
PILLOW
3年保証

縫製タイプ


サイズ：40×40×9/5cm 商品番号 127534

本体価格 19,000円 + 税

テンピュール-MED® デンタル

矯正治療や口腔手術などでも快適さを保ち患者さんの緊張を和らげます。

テンピュール-MED® デンタルマットレス

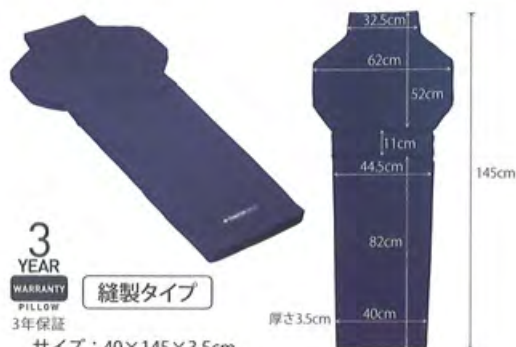

3
YEAR
WARRANTY
PILLOW
3年保証

縫製タイプ

サイズ：40×145×3.5cm

本体価格 80,000円 + 税

ブルー 商品番号 110282

テンピュール-MED® デンタルピロー



3
YEAR
WARRANTY
PILLOW
3年保証

縫製タイプ

サイズ：18×18×4.5cm

本体価格 9,500円 + 税

ブルー 商品番号 125580

テンピュール-MED® デンタルネックピロー



3
YEAR
WARRANTY
PILLOW
3年保証

縫製タイプ

サイズ：18×18×10/6cm

本体価格 10,000円 + 税

ブルー 商品番号 125550
ダークグレー 商品番号 125558

テンピュール-MED® 製品の重要情報

テンピュール®のユニークな素材特性

テンピュール®素材とは、人の体温を感知することのできる、オープンセル構造の粘弾性フォームです。体圧を分散させるその独自の特性により、身体の一部にかかる圧力を軽減し、バランスよく全身を支えます。テンピュール®の粘弾性素材は、体形に合わせてゆっくりと形状が変化する特徴を持っており、体圧がかからなくなればもとの形に戻ります。形状の変化のスピードは体温によって変わり、また気温の高い日はテンピュール®を軟らかく感じる場合があります。テンピュール®は体温を感知して反応するため、寒い日でも体温を受けて軟らかくなり体にフィットします。

テンピュール®には高密度のフォームが使われており、極めて優れた寸法安定性と快適性を維持します。

体圧分散

テンピュール®素材は体圧を均一に分散させるため、身体の一部にかかる圧力を大きく軽減します。体圧を分散させるその特性は、床擦れの防止に効果的です。

テンピュール®素材の使用

テンピュール®素材は体圧を分散させるその独自の特性により、ゆっくりと沈みながら身体に自然にフィットしていきます。テンピュール®素材のマットレスは、お使いいただくうちに内部のセル(気泡)が広がり、体圧や体温にだんだん早く反応するようになり身体になじみます。したがって素材が以前より軟らかくなったと感じられることがあるかもしれませんが、体圧を分散させる特性はまったく変わっておらず、逆に快適さは一層向上します。なお製品を開梱するとき独特のにおいがすることがありますが、そのままお使いいただくうちにすぐに消えます。健康にはまったく無害ですのでご安心ください。

衛生

テンピュール®素材は環境に配慮した方法で抗菌処理されているため、細菌やかびが発生する心配はほとんどありません。ただし定期的に通気のよい場所で陰干しして、湿気を取り除く必要があります。

CEマーキング

テンピュール-MED®製品は、ヨーロッパ地域で販売・流通する製品がEUの安全基準をみたしていることを示すCEマークの認定を受けています。これは製品の特性が、指令93/42/ECCの要件を満たしていることを示しています。

耐火性

テンピュール-MED®製品は、EUまたは英国で適用される耐火性の安全基準EN/ISO 597-1およびEN/ISO 597-2を満たしています。

テンピュール®素材の取り扱い

運搬と保管

テンピュール-MED®製品を運搬または保管する際は、以下の点にご注意ください。

- テンピュール-MED®コンビマットレスはできるだけ元の包装に入れて、折りたたまずに保管してください。
- テンピュール-MED®オーバーレイマットレスは、巻いた状態でも広げた状態でも保管できます。

テンピュール®素材には粘弾性があるため、コンビマットレスと巻いた状態のオーバーレイマットレスは運搬中や保管中に圧縮されても問題ありません。室温にしばらく置いておくか、または製品の使用を開始してしばらくすると、元のサイズに戻ります。

- テンピュール-MED®ピローは、折り曲げたり巻いたりせずにそのままの状態に保管してください。

テンピュール-MED®製品の一般的な取り扱い方法として、折り曲げたり潰したりすることはお避けください。素材を損ねる原因となります。

- テンピュール-MED®製品を長期間保管するときは、相対湿度65%以下の乾燥した場所に置いてください。
- お手入れの済んだテンピュール-MED®製品は、使用前または保管前に完全に乾燥状態であることを確認してください。
- テンピュール-MED®製品に欠陥があったときは、返品前に必ずテンピュール®からの指示/同意を受けてください。

テンピュール-MED®製品専用カバー

テンピュール-MED®製品専用のPUカバーは、防水性と通気性に優れたポリウレタン(PU)製のため、中のテンピュール®素材をさらっと快適に保ちます。

テンピュール-MED®製品に使用されるすべてのPUカバーは、BS7175 sec. 3の耐火性の安全基準を満たしています。

テンピュール®素材をできるだけ長くご使用いただくために、PUカバーに穴や破れ目がないことを定期的に確認してください。PUカバーに穴や破れ目、または明らかな磨耗があったときは交換してください。これらの徴候があったにもかかわらず交換されていない場合は、テンピュール®製品の保証は無効となります。

滑り止めコーティング

一部のテンピュール-MED®製品には、裏側に滑り止めコーティングが施されています。これにより使用中に製品が移動したりずれたりするのを防ぎます。なおカバーを洗濯しても滑り止めの性能が落ちることはありません。

ジャージーカバー（※日本では販売しておりません）

テンピュール-MED®の車椅子用クッション、ウェッジクッション、およびシートクッションには、耐久性に優れた専用のジャージーカバーをご用意しております。交換や洗濯の際は、カバーの取り扱い表示ラベルをよくお読みください。カバーの素材についても、この取り扱い表示ラベルをご覧ください。なお洗濯の前に、カバーを裏返しにしてジッパーをすべて閉めてください。

お手入れについて

テンピュール®素材は、ご家庭で洗濯(水洗い)できません。素材の特性が損なわれる原因となります。

テンピュール-MED®製品のお手入れの際は、カバーを外して中のテンピュール®素材を通気の良い場所に陰干しするか、または湿らせた布をよく絞ってから表面の汚れや埃を丁寧に拭き取ってください(カバーの適切なお手入れ方法については、次章または取り扱い表示ラベルを参照してください)。

テンピュール-MED®コンビマットレスは、通気の良いベッドフレーム(マットレスに湿気が溜まるのを防ぐことができるスプリングやスラット付きのもの)に常に配置してください。

テンピュール®素材には、オートクレーブ滅菌は使用できません。テンピュール®素材は環境に配慮した方法で抗菌処理されているため、細菌やかびが発生する心配はほとんどありません。

PUカバー

毎日のお手入れ方法:PUカバーは刺激の少ない石鹸水で拭いてください。またご使用前や保管前に完全に乾燥させてください。

PUカバーは洗濯機でお洗濯いただけます(水温95℃まで)。乾燥機をご使用の際は、低温設定にしてください。PUカバーは裏返しにしてジッパーを開けてからお洗濯ください。洗剤はpH値5.5~9.0のものをお使いください。

PUカバーのお手入れには、以下の一般的な医用消毒剤も使用できます。70%エタノール、または0.1%次亜塩素酸ナトリウム。

以下の商品名の消毒剤や洗剤も使用できます。
Actisan-5L、Dax Plus、Dettol、H.A.C.、Indur Des、Precept、Reocid、Sintocid (1%溶液)、Virkon (1%溶液)。
なおフェノールを含有している洗剤は使用できません。

消毒剤や洗剤を使用した後は完全に洗い落とすか、または完全に拭き取ってください。PUカバーは、ご使用前または保管前に完全に乾燥させてください。

保証

ピロー 3年間
PUカバー 3年間
マットレス 7年間(限定保証*)

上記の保証は、テンピュール®素材の劣化により、深さ2センチ以上の明らかなへこみなどの欠陥や変形が生じた場合に適用されます(ただしコンフォートクッションは除きます)。硬さや特性の経年的変化については、製品の体圧分散の機能に影響がない限り保証されません。またこれらの保証は、テンピュール-MED®製品を指示どおりにご使用ならびにお取り扱いいただいた場合にのみ有効です。

以下の事項は保証の対象外です。

- テンピュール-MED®製品をテンピュール®の許可なしに改造または修理した場合。
- 製品の使用、洗浄および管理について、テンピュール®の指示を守らなかった場合。
- 製品の不具合の原因が、管理不良、乱暴な使用、またはその他の理由にある場合。

万が一製品に不具合などがあり、保証請求を行われる場合、お手数ですがお客様のご購入を証明する納品書もしくは領収書をご用意の上、購入店までお問い合わせください。なお保証に基づき製品を修理または交換した場合は、元の保証期間は延長されません。

テンピュール-MED®マットレス製品をご購入いただいてから3年以上経過した後、製品に関する不具合についてテンピュール®がその妥当性を認めた場合、購入使用年数に応じた相応の料金をお支払い頂き、製品の交換をいたします。

*なお製品の価格は当初の購入価格、つまり購入者が製品の購入に当たり実際に支払われた金額に基づくものとします。

*限定保証

0~3年間:無償交換
4年間:購入価格の10%ご負担
5年間:購入価格の30%ご負担
6年間:購入価格の60%ご負担
7年間:購入価格の80%ご負担
7年を上回る場合:保証なし



日本総販売元 テンピュール・シーリー・ジャパン

www.tempur.com

お問い合わせ先 078-335-2277

営業時間/月～木曜日10:00～13:00/14:00～18:00

金曜日10:00～13:00/14:00～17:00

定休日/年末年始、弊社指定日

商品についてのお問い合わせ

Copyright (C) 2008 Tempur Japan Corporation. All Rights Reserved.
本カタログ内の全ての画像またはその一部を無断で使用・複製・転載したり営業目的に使用することを禁じます。